

Překlad původního návodu k používání

AKU MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

BP12828



Návod k obsluze

Překlad návodu

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	4
III. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	5
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
V. URČENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	6
VI. POPIS ČÁSTI MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	6
VII. NABÍJENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	8
VIII. ZAPÍNÁNÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	8
IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy nástroje a bezpečnosti práce. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BP12828

I. ZÁRUKA A SERVIS**Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- Elektrická zařízení by měly splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvedené v normách a příslušných předpisech po celou dobu používání.
- Osoby pracující s elektrickými zařízeními by měly být vybaveny vhodným pracovním oblečením a osobními ochrannými prostředky.
- Osoby pracující s elektrickými zařízeními by měly dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné pro elektrická zařízení.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Před zahájením práce je třeba se seznámit s dokumentací k elektrickému zařízení a připravit potřebné nářadí, nástroje, výstražné tabulky a potřebné izolační zařízení.
- Zkontrolujte technický stav zařízení a elektrických instalací (stav izolace vodičů, kabelů, zástrček, vypínačů, zásuvek), nulování, uzemnění, stav ochrany proti požáru a proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte technický stav proudové ochrany.
- Zkontrolujte stav značení protipožárních zařízení a elektrické instalace.

ČINNOSTI BĚHEM PRÁCE A PO JEJÍM UKONČENÍ

- Elektrické zařízení je třeba provozovat pouze v souladu s jeho určením.
- V případě nutnosti je třeba opustit pracoviště, zastavit obsluhované stroje a veškeré jiné zařízení, které mohou způsobit nebezpečí, a je třeba odpojit napětí.
- Pokud je nutné pracovat pod napětím, je třeba použít nářadí a izolační zařízení, jakož i dielektrické rukavice a obuv.
- V případě, že se zařízení automaticky vypne nebo se spálí pojistky, zapněte je znovu po odstranění příčiny zkratu a instalaci nových pojistek.
- Pro připojení strojů a zařízení použijte zásuvky s uzemňovacím kontaktem, pokud to vyžaduje elektrická instalace.
- Po dokončení práce musíte zajistit elektrická zařízení, uspořádat pracoviště, nářadí a vybavení.

JE ZAKÁZÁNO:

- x uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti možnosti úrazu elektrickým proudem
- x provádění změn v používaném zařízení
- x odstraňování ochrany, zabezpečení, zkratování relé, blokování spínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistek

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

- x instalovat pojistky při zapnutém stroji
- x tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky
- x používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou
- x přetěžování elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu
- x dotýkání se částí, které jsou pod napětím, dotýkání se kondenzátorových svorek (i když jsou odpojeny)
- x ponechání bez dozoru elektrických zařízení připojených k síti. Před opuštěním pracoviště je třeba odpojit všechna elektrická zařízení od sítě
- x umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných drog

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolněte osobu, která je pod napětím
 - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
 - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
 - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
 - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka,
 - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz,
 - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci).

III. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

UPOZORNĚNÍ! Pokud se Vás týká kterýkoliv z níže uvedených bodů, poradte se se svým lékařem před použitím masážního přístroje:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ✓Těhotenství | ✓Migrény |
| ✓Cukrovka | ✓Vyhřezlá ploténka |
| ✓Poškození sítnice | ✓Spondylolistéza |
| ✓Kardiostimulátor | ✓Nemoci kloubů |
| ✓Nedávné operace | ✓Kovové šrouby v těle |
| ✓Epilepsie | ✓Chronická onemocnění |

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BP12828
Úroveň hlasitosti	45 dB
Amplituda	10 mm
Frekvence	1800 úderů/min až 3300 úderů /min (30 Hz - 53 Hz)
Doba nabíjení	2,5 - 3 hodiny
Baterie	Li Ion 2400 mAh, 24 V, vyměnitelná
Doba provozu na jedno nabití	Až 240 minut
Pouzdro	ABS + silikon

V. URČENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

Vibrační masážní zařízení vám umožní uvolnit napjaté svaly, zvýšit krevní oběh, zlepšit kvalitu svalů a dosáhnout optimálního rozsahu pohybu. Masážní přístroj je lehké a bezdrátové zařízení pro vibrační terapii, určené jak pro profesionální použití fyzioterapeuty, tak pro jednotlivce, kteří se chtějí starat o své zdraví a chránit se před možným výskytem zranění a úrazů.

VI. POPIS ČÁSTI MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE



1. Bezkartáčový motor
2. 5stupňový indikátor nabití baterie (zelené a červené diody)
3. 3stupňový indikátor vibrací (modré diody)
4. Přepínač síly vibrací

5. Baterie Li-Ion 2400 mAh
6. Nabíjecí zásuvka
7. Spínač on/off
8. Vyměnitelné hlavice 6 ks

Tři provozní rychlosti masážního přístroje:

1. rychlost – 1800 úderů /min, 2. rychlost - 2400 úderů /min, 3. rychlost - 3200 úderů /min

URČENÍ VYMĚNITELNÝCH HLAVIC



1. **Vidlice** – hlavice vyrobená z tvrdého plastu, určená pro práci na užších a dlouhých svalech (např. vzpřimovač trupu, trapézový sval, dvojhlavý sval lýtkový). Je vhodný také při tkáňové terapii v oblasti Achillovy šlachy, kde vám umožňuje pracovat na tkáni obcházejíc šlachu. Zaoblené konce hlavice umožňují, aby se hlavice plynule pohybovala po těle a přesně se dostala k těm svalovým skupinám, pro které je určena.
2. **Tvar náboje** – nejpřesnější ze všech hlavic. Vyrobená z tvrdého plastu a určená pro spouštěcí body (hrudky na svalové tkáni způsobující bolest, často vystřelující do jiných částí těla). Přesně se dostane do nejméně dostupných svalových skupin.
3. **Plochá T a D** – vyrobená z tvrdého plastu, je vhodná pro práci na malých i velkých svalových skupinách. Zajišťuje velmi dobrý kontakt s tělem a umožňuje, aby se dostala do hlouběji umístěných tkání. Je také užitečná při práci na více ztuhlých a kompaktních svalových partiích, jako jsou čtyřhlavý sval stehenní nebo velký prsní sval.

NABÍJENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

4. **Kulatá** – nejuniverzálnější ze všech hlavic, vyrobená z odolné pěny, která se nedeformuje. Hlavice je určena k masáží všech částí těla a používá se k povrchové práci se střední intenzitou.
5. **Tlumič** - pro citlivé oblasti nebo oblasti v blízkosti kosti.

JAK POMOCÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE MASÍROVAT TĚLO?

- Masírujte vybranou část těla nejdéle 60 vteřin.
- Používejte pouze na suché oblasti těla.
- Používejte pouze na měkké tkáně - nepřikládejte masážní přístroj na kosti nebo hlavu.
- I přes jemný tlak se mohou během masáže objevit modřiny - zastavte masáž, když ucítíte známky bolesti nebo nepohodlí.

VII. NABÍJENÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím masážního přístroje zařízení plně nabijte - až 6 hodin.
- Blikání LED diod signalizuje, že se masážní přístroj nabíjí.
- Baterie je plně nabitá, když LED diody přestanou blikat a trvale svítí.
- Baterii lze nabíjet kdykoli během práce masážního přístroje.
- Baterii lze nabíjet i v případě, že není zcela vybitá.
- Nedoporučuje se, aby docházelo k častému úplnému vybití baterie.
- Průměrná provozní doba baterie je 2 hodiny.

VIII. ZAPÍNÁNÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

1. Namontujte baterii do pouzdra masážního přístroje. Ujistěte se, že je na správném místě a že je vložena rovně.
2. Posunutím přepínače do polohy ON (ZAPNUTÝ) spustíte masážní přístroj. Posunutím přepínače do polohy OFF vypnete masážní přístroj.
3. Jedním stisknutím tlačítka POWER zapnete první rychlost masážního přístroje. Stiskněte dvakrát tlačítko POWER, chcete-li zapnout druhou rychlost a třikrát, chcete-li zapnout třetí rychlost. Modrá LED dioda indikuje, jaká rychlost činnosti masážního přístroje je nastavena.
4. Vložte odpovídající hlavici.
5. Začněte masírovat vybranou část těla.
6. Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte jemně tlačítko pro uvolnění baterie. Pevně zatáhněte baterii dolů.

IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

X. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S.C.
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název výrobku: Aku masážní přístroj 24 V
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)

Model (obchodní označení): BP12828

Parametry výrobku:

Frekvence úderů: 1800 - 3600 úderů za minutu

Baterie: Li-ion 2400 mAh, 24 V

Hladina hluku: Lpa: 43 dB, Lwa: 45 dB

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

2014/30/EU

2014/25/EU

Podle norem:

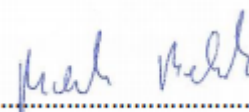
EN 60335-1:2012+A11:2014/AC:2004

EN 55014-1:2017

EN 55014:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Certifikační orgán: UTS, United-standard Testing & Certification centre, Shanghai, Čína**Osoba odpovědná za vystavení a uchování technické dokumentace:** Marek Belniak
.....

2. 11. 2019

Marek Belniak

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko